

ODOFIN™

TasteStrips




Taste Test 25

burgdorf
MESSTECHNIK

ČESKY



PZN: 17975326

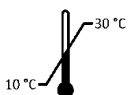

Burghart Messtechnik GmbH
 Uetersener Straße 6
 D - 25488 Holm
 ☎ +49 4103 80076-0
 📠 + 49 4103 80076-29

✉ info@burghart-mt.de
 🌐 www.burghart-mt.de



Obsah

Účel	4
Uživatel	4
Oblasti použití	4
Věková skupina	4
Varování	4
Kontraindikace	4
Informace pro pacienty.....	5
Informace pro uživatele.....	5
Výkon.....	5
Provádění	5
Odolnost	5
Skladování:	5
Likvidace.....	5
Příslušenství	5
Použité tkaniny	6
LEGENDA.....	6

DŮLEŽITÉ
PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
ULOŽIT PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Účel

Orientační vyšetření, zda je přítomna schopnost ochutnávání.

Uživatel

Test mohou provádět pouze odborní lékaři.

Oblasti použití

Přibližně 10-15 % pacientů s poruchami čichu má také poruchy chuti. Proto se doporučuje zkontrolovat chuťové i čichové schopnosti. Proužky ve 4 základních chuťových vlastnostech "sladké", "kyselé", "slané" a "hořké" umožňují zkoumat chuťové funkce.

"Chuťový test 25" je doplňkovým testem ke "Screeningovému testu 12" a slouží k orientaci, zda je třeba zahájit další vyšetření.

Jako další zkoušku je možné použít "Test chuti 50". Obsahuje chuťové proužky se základními chuťovými vlastnostmi "sladká", "kyselá", "slaná" a "hořká" ve 4 různých koncentracích, aby bylo možné určit závažnost poruchy chuti.

Věková skupina

Pro test není stanoveno žádné věkové omezení.

Varování



Ptejte se pacientek, zda jsou těhotné. Hořká chuť se NESMÍ používat u těhotných žen. Jako hořká látka se používá chinin.



Ochutnávací proužek použijte pouze JEDNOU na pacienta nebo na oblast jazyka. Poté je třeba degustační pásek zlikvidovat.



Pokud jste alergičtí na některou z použitých látek (viz tabulka na straně 6), tento test nepoužívejte.



Při podávání se vyhněte kontaktu s kůží a použijte přiloženou pinzetu.



Při aplikaci v ústní dutině se vyhněte rychlým pohybům s ochutnávacím proužkem.



Všimněte si, že poškozený výrobek může vést k nesprávnému hodnocení.

Výrobek může být ohrožen:

- Změna koncentrace způsobená nesprávným skladováním
- Neúplný test nebo záměna degustačních proužků, pokud nejsou použity dodané skladovací nádoby.
- Změna koncentrace způsobená použitím po uplynutí doby použitelnosti
- v případě nedodržení správné aplikace popsané v návodu k použití.
- v případě nesprávné aplikace způsobené nečitelným nebo chybějícím označením.

Kontraindikace

Pokud jste těhotná, nepoužívejte hořký "chuťový proužek". Nepoužívejte v případě alergie na některou z použitých látek.

Informace pro pacienty

Pacient by měl být o testu informován následujícím způsobem: Je třeba otestovat jejich chuťový vjem. To se provádí pomocí degustačních proužků. Olizují kartonové proužky napuštěné různými koncentracemi sladkých, kyselých, slaných a hořkých látek. Látky použité v testu jsou v předložené formě zdravotně nezávadné a používají se v potravinách (sacharóza, chlorid sodný, kyselina citronová, chinin - například v hořkém citronu).

Pokud nemůžete nic ochutnat, uveďte to ("bez chuti"). Při hodnocení testu se zohlední, zda jste schopni vnímat nebo identifikovat kvalitu.

Test trvá přibližně 5 minut na pacienta.

Informace pro uživatele

Aplikace se provádí při testování degustačních schopností přiložením degustačních proužků na jazyk a zavřením úst (jazykem může pacient pohybovat). Pokud je zájem o chuťovou citlivost určitých oblastí jazyka (např. testování oddělených stran), zůstávají ústa otevřená a proužek je v kontaktu pouze s touto oblastí, dokud pacient není schopen odpovědět. Látky použité v testu jsou v předložené formě zdravotně nezávadné a používají se v potravinách (sacharóza, kuchyňská sůl, kyselina citronová, chinin - např. v hořkém citronu).

Výkon

Do jedné ruky vezměte pinzetu a druhou rukou současně otevřete plechovku. Degustační proužky se musí odebírat **POUZE** přiloženou pinzetou. Odpověď pacienta může být zaznamenána v hodnotícím formuláři (☞), ale NEMÁ vliv na výsledek testu Screening 12.

Provádění

Přiloženou pinzetou vyjměte ochutnávací proužek a umístěte jej doprostřed jazyka tak, aby ochutnávací proužek stále mírně vyčníval z úst. Pacient by měl nyní zavřít ústa a mírně pohybovat jazykem. Po 5 až 10 sekundách se pacienta zeptáme, jakou chuť vnímá. Znovu vyjměte testovací proužek.

Mezi jednotlivými proužky se doporučuje počkat alespoň 30 sekund a nechat pacienta vypláchnout ústa vodou. Kromě toho by měla být "hořká" (plechovka M) nabízena jako poslední, protože tato chuť je přítomna nejdéle. Stejně jako u pachové zkoušky je k dispozici výběrová karta s podmínkami.

Odolnost

Každý degustační proužek je opatřen datem minimální trvanlivosti. Formát je DD MM RR. Neotevřené degustační proužky mají trvanlivost 5 let.

Po otevření je doba skladování omezena na 12 měsíců. Uveďte dobu prvního otevření symbolu (12M) nalepeného na plechovce.

Skladování:

Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě (10-30 °C), ne v chladničce.

Likvidace



Použité znečištěné proužky je třeba neprodleně vyhodit do domovního odpadu.


Příslušenství

Komponenta	Číslo článku
Pinzeta	LA-13-00310
Úložný box	LA-13-00338
Karta s více možnostmi výběru	LA-18-00080

Použité tkaniny

Kvalita chuti	Tkanina
Kyselina	Kyselina citronová
Slané	Chlorid sodný
Sladké	Sacharóza
Bitter	Chinin hydrochlorid dihydrát
Rozpouštědlo	Aqua Bidest

LEGENDA

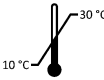	Identifikace
	Usnesení
	Věková skupina
	Aplikační teplota
	Datum minimální trvanlivosti
	Ochrana před slunečním zářením
	Postupujte podle návodu k použití
	Skladujte v suchu
	Výrobce
	Dodržujte výstražná upozornění
	Pouze na jedno použití
	Nepoužívejte během těhotenství
	Sladké
	Salty
	Sour
	Hořký