

ODOFIN™

Sniffin' Sticks & Taste Strips



Riech- und Schmecktests
zur Testung des Geruchs- und Geschmackssinns

Produkt-Katalog





Burghart Messtechnik GmbH
Uetersener Straße 6
25488 Holm
Deutschland



+49 4103 80076-0



+49 4103 80076-29



info@burghart-mt.de



www.burghart-mt.de

www.shop.burghart-mt.de

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	4
Standardtests mit Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial	5
Screening 12 Test	5
Screening 12 Test mit 4 Dosen à 25 Taste Strips.....	5
Extended Test	6
Taste Strips (50 Satz) je 4 Konzentrationen von süß, sauer, salzig, bitter + Blanks	7
Sonder- und Einzeltests mit Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial	8
Identifikationstest 16, blau	8
Identifikationstest Plus 16, lila.....	8
Schwellentest.....	9
Diskriminationstest.....	9
Kids Ident Test (Kinderriechtest)	10
Duft-Quartett 1 + 2 (Riechtraining)	11
Einzelstifte.....	12
Nachfüllsets ohne Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial	13
Zubehör	14
Riechstreifen für Sniffin' Sticks (Filterpapier)	14
Riechstreifenbögen für Sniffin' Sticks (Filterpapier)	14
Weiteres Zubehör für ODOFIN™-Produkte	15
Liste der Duftstoffe.....	16
Lösungen / Solutions	16
Lösungen von Reinstoffen / Solutions of Pure Substances	17
Informationen zur Bestellabwicklung	18
Haltbarkeit	18
Bestellungen	18
Preise	18
Kontakt	18
Vertriebspartner	19
Belgien, Niederlande und Luxemburg.....	19
Dänemark.....	19
Nordamerika	19

Einleitung


Die Burghart Messtechnik GmbH ist u.a. auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die olfaktorische und gustatorische Diagnose spezialisiert.

Die ODOFIN™ *Sniffin' Sticks* und *Taste Strips* sind weltweit anerkannt und bieten ein breites Anwendungsspektrum im Bereich der Medizin sowie in der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen und Industrien, wie z.B.

- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Rhinologie
- Neurologie
- Psychologie
- Lebensmittel- und Süßwarenherstellung
- Chemische Industrie
- Parfüm-Industrie

ODOFIN™ *Sniffin' Sticks* und *Taste Strips* sind einfach anzuwendende, zuverlässige Geruchs- und Geschmackstests für die Geruchs- und Geschmacksdiagnose sowie für die Forschung und Entwicklung - wissenschaftlich fundiert und standardisiert.

ODOFIN™ *Sniffin' Sticks* Riechtest-Sets enthalten Stiftkörper, wie sie sonst z.B. für Stifte zum Schreiben auf Kunststoff-Wandtafeln verwendet werden. Diese Stiftkörper sind jedoch mit Duftstoffen in einem Faserstab gefüllt. Beim Testen wird einfach die Kappe geöffnet und der Patient kann an der Stiftspitze riechen.

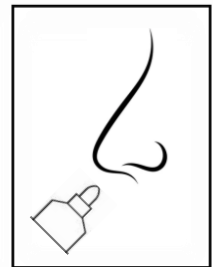

ODOFIN™ *Taste Strips* sind ein validiertes Untersuchungsverfahren zur Bestimmung des Schmeckvermögens.



ODOFIN™ *Sniffin' Sticks* und *Taste Strips* werden in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Olfaktologie und Gustologie der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V. entwickelt.

Die Produktion und Weiterentwicklung der Geruchs- und Geschmackstests der Burghart Messtechnik GmbH werden wissenschaftlich begleitet durch das Interdisziplinäre Zentrum für Riechen und Schmecken am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden, Deutschland.

Standardtests mit Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial

Screening 12 Test

Mit dem Screening 12 Test kann grob orientierend die Frage beantwortet werden, ob ein Patient ein normales oder vermindertes Riechvermögen besitzt. Dieser Riechtest wurde für den niedergelassenen HNO-Arzt, Neurologen oder Allgemeinarzt entwickelt.

Im Lieferumfang enthalten:

- 12 Riechstifte
- Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial

Das Auswertematerial ist in folgenden Sprachen erhältlich:

CZ, DE, DK, EN, ES, FI, FR, GR, IT, NL, NO, PL, PT



Artikel-Nr.: LA-13-00001
PZN: 17635748

Screening 12 Test mit 4 Dosen à 25 Taste Strips

Zusätzlich zu dem Screening 12 Test können mit den Taste Strips die vier Grundqualitäten des Geschmacks (süß, sauer, salzig, bitter) getestet werden. Der Patient soll mittels der Multiple-Choice-Vorlage (SÜSS-SAUER-SALZIG-BITTER) anzeigen, welche der 4 Qualitäten er wahrgenommen hat.

Im Lieferumfang enthalten:

- 12 Riechstifte
- 4 Dosen à 25 Taste Strips in der höchsten Konzentration
- Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial
- Pinzette

Das Auswertematerial ist in folgenden Sprachen erhältlich:

CZ, DE, DK, EN, ES, FI, FR, GR, IT, NL, NO, PL, PT



Artikel-Nr.: LA-13-00344
PZN: 17924978

Extended Test

Mit dem Extended Test kann eine detaillierte Untersuchung des Riechvermögens durchgeführt werden.

Bestehend aus Schwellen-, Diskriminations- und Identifikationstest.

Dieser Riechtest wurde für die Klinik (HNO, Neurologie, Psychiatrie, Innere Medizin, etc.) entwickelt.

Der Extended Test wird in 2 Varianten angeboten:

Im Lieferumfang enthalten:

- Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial
- Schwellentest **n-Butanol** (48 Riechstifte)
- Diskriminationstest (48 Riechstifte)
- Identifikationstest 16, blau (16 Riechstifte)



Hinweis:

Duftnote *n-Butanol* = Fusel, balsamischer Whiskey

Art.-Nr.: LA-13-00002
PZN: 17850079

Im Lieferumfang enthalten:

- Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial
- Schwellentest **2-Phenylethanol** (48 Riechstifte)
- Diskriminationstest (48 Riechstifte)
- Identifikationstest 16, blau (16 Riechstifte)



Hinweis:

Duftnote *2-Phenylethanol* = rosig
(auch als „Rosenschwelle“ bekannt)

Art.-Nr.: LA-13-00207
PZN: 17635754

Die einzelnen Module des Extended Tests sind wie folgt gekennzeichnet:

Bezeichnung	Beschriftungs- farbe	Farbe der Stiften	Anzahl der Stifte
Schwellentest n-Butanol	rot	rot (Target) grün, blau (Blanks)	16 Tripletts = 48 Stifte
Schwellentest 2-Phenylethanol	lila	rot (Target) grün, blau (Blanks)	16 Tripletts = 48 Stifte
Diskriminationstest	grün	grün (Target) rot, blau (Non-Target)	16 Tripletts = 48 Stifte
Identifikationstest	schwarz	blau	16 Stifte

Taste Strips (50 Satz) je 4 Konzentrationen von süß, sauer, salzig, bitter + Blanks

Der Taste Test 50 ist ein validiertes Untersuchungsverfahren zur Bestimmung des Schmeckvermögens. Die Anwendung erfolgt bei Überprüfung des Ganzmund-Schmeckvermögens durch Auflegen der Taste Strips auf die Zunge und Schließen des Mundes (die Zunge kann vom Patienten bewegt werden). Bei Interesse an der gustatorischen Sensitivität bestimmter Zungenareale (z.B. seitengetrennte Testung), bleibt der Mund geöffnet und der Streifen kommt nur mit diesem Areal in Kontakt, bis der Patient eine Antwort geben kann.

Dieser Schmecktest wurde für die Klinik (HNO, Neurologie, Psychiatrie, Innere Medizin, etc.) sowie für den niedergelassenen HNO-Arzt, Neurologen oder Allgemeinarzt entwickelt.

Im Lieferumfang enthalten:

- Je 4 Konzentrationen von süß, sauer, salzig, bitter und 3 Dosen mit Blanks
- 19 Dosen mit je 50 Taste Strips
- Gebrauchsanweisung
- Pinzette

Für 50 Anwendungen



Artikel-Nr.:	LA-13-00314
PZN:	17975303

Produkt-Ergänzung:

Für eine weitergehende Untersuchung können 4 Dosen mit 4 verschiedenen Konzentrationen der Geschmacksrichtung Umami zusätzlich bestellt werden.

Artikel-Nr.:	LA-13-00228
PZN:	--

Sonder- und Einzeltests mit Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial

Identifikationstest 16, blau

Hier wird die Fähigkeit untersucht, alltägliche Gerüche zu identifizieren.

Dieser Riechtest wurde entwickelt für den niedergelassenen HNO-Arzt, Neurologen und Allgemeinarzt.

Der Identifikationstest 16, blau besteht aus 16 Riechstiften mit Alltagsgerüchen, die vom Patienten mit Hilfe einer Auswahlkarte (Multiple-Choice-Karten) mit je vier Begriffen zu benennen sind.

Im Lieferumfang enthalten:

- 16 Riechstifte
- Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial



Artikel-Nr.: LA-13-00013
PZN: 17635731

Identifikationstest Plus 16, lila

Der Identifikationstest Plus 16, lila enthält weitere 16 alltägliche Gerüche. Er dient als Ergänzung zum Identifikationstest 16, blau, um eine mögliche Wiedererkennung der Stifte bei wiederholter Testung einer Person zu vermeiden.

Im Lieferumfang enthalten:

- 16 Riechstifte
- Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial



Artikel-Nr.: LA-13-00266
PZN: 17850091

Schwellentest

Die Riechschwelle wird in einem so genannten „Staircase-Verfahren“ ermittelt. Nach Bestimmung einer Startkonzentration des Duftes wird die Verdünnungsstufe festgestellt (Target), bei der der Geruch gerade eben von nicht-riechenden Proben (Blanks) unterschieden werden kann.

Diesen Test bieten wir in 2 Varianten an: mit n-Butanol und 2-Phenylethanol

Im Lieferumfang enthalten:

- 48 Riechstifte (32 Blanks und 16 Verdünnungen)
- Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial



Schwelle n-Butanol:
Artikel-Nr.: LA-13-00009
PZN: 17924903



Schwelle 2-Phenylethanol:
Artikel-Nr.: LA-13-00015
PZN: 17924932

Bezeichnung	Beschriftungs- farbe	Farbe der Stiften	Anzahl der Stifte
Schwellentest n-Butanol	rot	rot (Target) grün, blau (Blanks)	16 Tripletts = 48 Stifte
Schwellentest 2-Phenylethanol	lila	rot (Target) grün, blau (Blanks)	16 Tripletts = 48 Stifte

Diskriminationstest

Die Unterscheidung von Gerüchen basiert auf einem Vergleich zwischen 3 Duftdarbietungen (Triplet). Dabei wird zweimal der gleiche Geruch angeboten (Non-Target) und einmal ein anders riechender (Target). Aufgabe der Untersuchten ist es, den jeweils anders riechenden anzugeben. Diese Vergleiche werden für 16 Tripletts durchgeführt.

Im Lieferumfang enthalten:

- 48 Riechstifte (16 Tripletts)
- Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial



Artikel-Nr.: LA-13-00011
PZN: 17924889

Kids Ident Test (Kinderriechtest)

Der Kids Ident Test (Kinderriechtest) dient zur Beurteilung der Geruchsfunktion bei Kindern im Alter von 6 bis 17 Jahren. Mit dem Ergebnis des Tests kann man zwischen normaler Riechfähigkeit (Normosmie) und eingeschränkter Riechfähigkeit (Hyposmie) unterscheiden.

Im Lieferumfang enthalten:

- 12 Riechstifte
- Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial



Artikel-Nr.: LA-13-00407
PZN: 17850122

Duft-Quartett 1 + 2 (Riechtraining)

Duft-Quartett 1

Mit den Riechstiften des Duft-Quartetts lässt sich der Geruchssinn bei vielen Personen bzw. Patienten verbessern.

Die Wirkung des Riechtrainings beruht nach heutigem Kenntnisstand sowohl auf einer Stimulation der Riechschleimhaut in der Nase als auch auf einer Verbesserung der Sinneseindrücke im Gehirn.

Das Duft-Quartett besteht aus 4 Riechstiften, die unterschiedliche Düfte freisetzen: Zitrone, Rose, Gewürznelke und Eukalyptus.

Im Lieferumfang enthalten:

- 4 Riechstifte
- Gebrauchsanweisung (deutsch / englisch)
- Baumwollhandschuhe



Artikel-Nr.: LA-13-00067
PZN: 17635725

Duft-Quartett 2 - Zur Fortsetzung des Geruchstrainings

Die Wirkung des Riechtrainings kann durch die Anwendung von vier weiteren Düften gesteigert und der Geruchssinn bei vielen Personen bzw. Patienten verbessert werden.

Wie beim Duft-Quartett 1 beruht die Wirkung des Riechtrainings nach heutigem Kenntnisstand sowohl auf einer Stimulation der Riechschleimhaut in der Nase als auch auf einer Verbesserung der Sinneseindrücke im Gehirn.

Das Duft-Quartett 2 besteht aus 4 Riechstiften, die unterschiedliche Düfte freisetzen: Menthol, Thymian, Jasmin und Mandarine.

Im Lieferumfang enthalten:

- 4 Riechstifte
- Gebrauchsanweisung (deutsch / englisch)
- Baumwollhandschuhe



Artikel-Nr.: LA-13-00478
PZN: 17924961

Einzelstifte

Einzelstifte können sowohl unbefüllt als auch individuell befüllt erworben werden.

Einzelstifte befüllt sind mit verschiedenen Duftstoffen erhältlich.
Die Liste der Duftstoffe finden sie im Anhang dieses Katalogs.



Bitte kontaktieren Sie uns
für nähere Informationen

Verfügbare Farbe für die Endkappen der Stifte:

- rot, grün, schwarz, blau, gelb oder lila

Beschriftungsoptionen:

- Nummerierung: 1 bis 16 oder unbeschriftet
- Farbe der Nummern: rot, grün, schwarz oder lila

**Bitte geben Sie stets die Farbe der Endkappen und
Beschriftung sowie die gewünschte Nummerierung an.**

Nachfüllsets ohne Halter, Gebrauchsanweisung und Auswertematerial

• Screening 12 Test Lieferumfang: 12 Riechstifte	Artikel-Nr.: LA-13-00004 PZN: 17635777
• Extended Test Lieferumfang: 112 Riechstifte Schwellentest n-Butanol, Diskriminationstest, Identifikationstest 16, blau	Artikel-Nr.: LA-13-00005 PZN: 17850085
• Extended Test Lieferumfang: 112 Riechstifte Schwellentest 2-Phenylethanol, Diskriminationstest, Identifikationstest 16, blau	Artikel-Nr.: LA-13-00061 PZN: 17635760
• Identifikationstest 16, blau Lieferumfang: 16 Riechstifte	Artikel-Nr.: LA-13-00014 PZN: 17635808
• Identifikationstest Plus 16, lila Lieferumfang: 16 Riechstifte	Artikel-Nr.: LA-13-00267 PZN: 17850116
• Schwellentest n-Butanol Lieferumfang: 48 Riechstifte (32 Blanks, 16 Verdünnungen)	Artikel-Nr.: LA-13-00010 PZN: 17924926
• Schwellentest 2-Phenylethanol Lieferumfang: 48 Riechstifte (32 Blanks, 16 Verdünnungen)	Artikel-Nr.: LA-13-00016 PZN: 17924949
• Schwellentest vermindert n-Butanol Lieferumfang: 20 Riechstifte (4 Blanks, 16 Verdünnungen)	Artikel-Nr.: LA-13-00048 PZN: --
• Schwellentest vermindert 2-Phenylethanol Lieferumfang: 20 Riechstifte (4 Blanks, 16 Verdünnungen)	Artikel-Nr.: LA-13-00049 PZN: --
• Diskriminationstest Lieferumfang: 48 Riechstifte = 16 Tripletts	Artikel-Nr.: LA-13-00012 PZN: 17924895
• Taste Strips 25 Satz Lieferumfang: 4 Dosen mit je 25 Taste Strips in der höchsten Konzentration von süß, sauer, salzig, bitter	Artikel-Nr.: LA-13-00331 PZN: 17975326
• Kids Ident Test (Kinderriechtest) Lieferumfang: 12 Riechstifte	Artikel-Nr.: LA-13-00408 PZN: 17850139

Zubehör

Riechstreifen für Sniffin' Sticks (Filterpapier)

Die Burghart-Messtechnik-Riechstreifen aus Filterpapier können für den Screening-, Identifikations- und Diskriminationstest angewendet werden. Anstatt des Riechstiftes wird dem Patienten ein präparierter Riechstreifen präsentiert.

Riechstreifen können eingesetzt werden, wenn eine Kontamination der Riechstifte durch Patienten unbedingt zu vermeiden ist. Die Haltbarkeit der Riechstifte wird durch diese Methode u.U. vermindert.

Im Lieferumfang enthalten:

- 50 Riechstreifen in Dose
- Gebrauchsanweisung
- Pinzette



Artikel-Nr.: LA-13-00419
PZN: --


Riechstreifenbögen für Sniffin' Sticks (Filterpapier)

Die Burghart-Messtechnik-Riechstreifen aus Filterpapier können für den Screening-, Identifikations- und Diskriminationstest angewendet werden. Anstatt des Riechstiftes wird dem Patienten ein präparierter Riechstreifen präsentiert.

Riechstreifen können eingesetzt werden, wenn eine Kontamination der Riechstifte durch Patienten unbedingt zu vermeiden ist. Die Haltbarkeit der Riechstifte wird durch diese Methode u.U. vermindert.

Im Lieferumfang enthalten:

- 4 Bögen zu je 25 Riechstreifen
- Gebrauchsanweisung

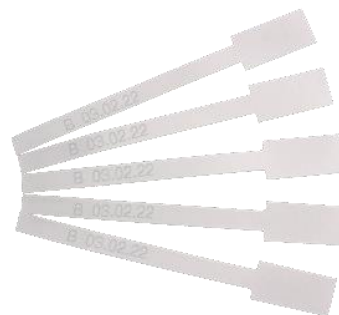

Artikel-Nr.: LA-13-00420
PZN: --

Weiteres Zubehör für ODOFIN™-Produkte

• Halter, klein für Identifikationstest 16, blau und Identifikationstest 16 Plus, lila (16 Bohrungen)	Artikel-Nr.: LA-13-00328
• Halter, klein für Screening 12 Test und Kids Ident Test (12 Bohrungen für Stifte und 4 Bohrungen für Taste Strips-Dosen)	Artikel-Nr.: LA-13-00339
• Halter, groß für Schwellentest oder Diskriminationstest (48 Bohrungen)	Artikel-Nr.: LA-13-00327
• Gebrauchsanweisung für Screening 12 Test	Artikel-Nr.: LA-18-00088
• Gebrauchsanweisung für Extended Test inkl. Kopiervorlagen für Auswertung	Artikel-Nr.: LA-18-00119
• Gebrauchsanweisung für Identifikationstest 16, blau und Identifikationstest 16 Plus, lila	Artikel-Nr.: LA-18-00103
• Gebrauchsanweisung für Schwellentest inkl. Kopiervorlagen für Auswertung	Artikel-Nr.: LA-18-00120
• Gebrauchsanweisung für Diskriminationstest inkl. Kopiervorlagen für Auswertung	Artikel-Nr.: LA-18-00121
• Gebrauchsanweisung für Taste Strips (50 Satz) inkl. Kopiervorlagen für Auswertung	Artikel-Nr.: LA-18-00051
• Auswerteblock für Screening 12 Test, Identifikationstests, Kids Ident Test (50 Blatt)	Artikel-Nr.: LA-18-00077
• Identifikationsblock für Screening 12 Test und Kids Ident Test (50 Blatt)	Artikel-Nr.: LA-18-00078
• Identifikationsblock für Identifikationstest 16, blau und Identifikationstest 16 Plus, lila (50 Blatt)	Artikel-Nr.: LA-18-00104
• Multiple-Choice Karten 1-16 für Identifikationstest 16, blau (deutsch / englisch)	Artikel-Nr.: LA-18-00108
• Multiple-Choice Karten 1-16 für Identifikationstest 16 Plus, lila (deutsch / englisch)	Artikel-Nr.: LA-18-00109
• Multiple-Choice Karten 1 - 12 für Screening 12 Test (bitte Sprache angeben)	<i>Bitte kontaktieren Sie uns</i>
• Multiple-Choice Karten 1-12 für Kids Ident Test	Artikel-Nr.: LA-18-00100
• Multiple-Choice Karten für Geschmackstest	Artikel-Nr.: LA-18-00080

Unsere Anleitungen sind in mehreren Sprachen verfügbar und stehen mit dem dazugehörigen Auswertematerial zum Download unter folgendem Link zur Verfügung:

www.burghart-mt.de/downloads

Liste der Duftstoffe

Lösungen / Solutions



Ahorn	Himbeere	Menthol
Ananas	Ingwer	Milch
Apfel (natürlich)	Jasmin	Nelke (Gewürznelke)
Apfel (süß)	Käse	Orange
Banane	Kaffee I (geröstete Bohnen)	Pfefferminze
Birne		Pfirsich
Blume	Kaffee II (Caramel Macchiato)	Pilze
Butter		Räucherspeck
Cola	Kakao	Rose
Erdbeere	Karamell	Sesamöl
Essig	Kirsche	Sojasauce
Eukalyptus	Knoblauch	Terpentin
Fisch	Kokos	Thymian
Flieger	Lakritz / Anis	Vanille
Geräuchertes	Lavendel	Zimt
Grapefruit	Leder	Zitrone
Gras	Mandarine	Zwiebel
Haselnuss	Melone	



Maple	Raspberry	Menthol
Pineapple	Ginger	Milk
Apple (natural)	Jasmine	Clove (clove)
Apple (sweet)	Cheese	Orange
Banana	Coffee I (roasted beans)	Peppermint
Pear		Peach
Flower	Coffee II (caramel macchiato)	Mushrooms
Butter		Smoked bacon
Cola	Cocoa	Rose
Strawberry	Caramel	Sesame oil
Vinegar	Cherry	Soy sauce
Eucalyptus	Garlic	Turpentine
Fish	Coconut	Thyme
Lilac	Liquorice / Anise	Vanilla
Smoked	Lavender	Cinnamon
Grapefruit	Leather	Lemon
Grass	Tangerine	Onion
Hazelnut	Melon	

Lösungen von Reinstoffen / Solutions of Pure Substances

	n-Butanol		n-Butanol
	Linalool		Linalool
	(+)-Carvon		(+)-Carvone
	(-)-Carvon		(-)-Carvone
	(+)-Fenchon		(+)-Fenchone
	(-)-Fenchon		(-)-Fenchone
	Isoamylacetat		Isoamylacetate
	Citronellal		Citronellal
	(+)-Limonen		(+)-Limonene
	(-)-Limonen		(-)-Limonene
	Geraniol		Geraniol
	2-Phenylethanol		2-Phenylethanol
	Eugenol		Eugenol

Informationen zur Bestellabwicklung

Haltbarkeit

Riech- und Schmecktests sind mit einem Haltbarkeitsdatum versehen.

Riechstifte sind bis ca. 12 Monate nach Produktion haltbar.

Ausnahme: Schwellentest n-Butanol ist bis ca. 6 Monate nach Produktion haltbar.

Schmeckstreifen sind ab Produktion bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar. Ab Öffnung beträgt die Haltbarkeit 12 Monate.

Bestellungen

Bestellungen können wahlweise online unter www.shop.burghart-mt.de getätigt werden oder per Fax +4103 80076-29 und Email unter info@burghart-mt.de unter Verwendung des **ODOFIN™** Angebots- und Bestellformulars (bitte kontaktieren Sie uns).

Preise

Die jeweils aktuell gültigen Preise sind in unserem Webshop ersichtlich oder können dem **ODOFIN™** Angebots- und Bestellformular entnommen werden.

- Ab einem Auftragswert von € 1.000,00 gewähren wir einen Rabatt von 5 %.
- Alle Preise gelten zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer.
- Mindestbestellwert: € 45,00 pro Bestellung.
- Lieferbedingung: ex works (Incoterms 2020) zuzüglich Porto/Fracht und Verpackung.
- Zahlungsbedingung: 14 Tage netto nach Rechnungsstellung

Bei Bestätigung einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, werden Lieferungen innerhalb der EU steuerfrei als innergemeinschaftliche Lieferung gemäß §§ 4 Nr. 1b, 6a Abs. 1 UStG ausgeführt.

Kontakt

Für Informationen steht Ihnen unser Vertriebs-Team per E-Mail unter info@burghart-mt.de oder telefonisch unter +49 4103 80076-0 zur Verfügung.

Vertriebspartner

Belgien, Niederlande und Luxemburg


Sense Trading BV

Peizerweg 97, 9727 AJ Groningen, Niederlande

www.smelltest.eu

info@medi-sense.nl

+31 (0)6 27899756

Dänemark


Abena A/S

Egelund 35, 6200 Aabenraa, Dänemark

www.abena.dk

info@abena.dk

+45 (0) 7431 1818

Nordamerika


Vertriebsrepräsentant:
Mr. Steve Yarcusko

116 Waverly Lane

Chagrin Falls, OH 44022, U.S.A.

steve.yarcusko@gmail.com

+1 216 789 6147



St. Croix Sensory, Inc.

Vertrieb durch:
St. Croix Sensory, Inc.

1150 Stillwater Blvd. N.

Stillwater, MN 55082, U.S.A.

www.fivesenses.com

stcroix@fivesenses.com

+1 800 879 9231