


RM20 CS Rebuild Service



RM20/CS (ohne Haube) **vor** der Überholung
Überholung

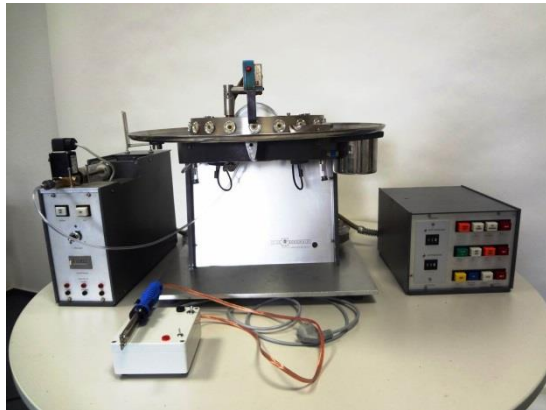

RM20/CSR (mit Haube) **nach** der
Überholung

Noch immer kommt die RM20/CS mitsamt dem RGA-System, der Pneumatikeinheit inkl. Canada Intense sowie dem Zugzahldrucker in vielen Rauchlaboren weltweit, als verlässlich arbeitende Rauchmaschine, zum Einsatz. Um diesen Einsatz auch weiterhin sicherzustellen, bieten wir die Überholung der RM20/CS sowie der dazugehörigen Komponenten an. Dieser Service umfasst:

- Wareneingangstest und Aufstellung über defekte Teile
- Vollständige Demontage des Gerätes
- Lackieren aller Gehäuseteile inkl. Gravur der Front- und Rückwände
- Arbeit zum Austausch defekter Teile
- Arbeit zur Überarbeiten oder zum Ersetzen beweglicher Teile
- Kleinteile (Schrauben, Muttern, Kabel usw.)
- Reinigung der Komponenten (soweit möglich)
- Austausch des mechanischen Gedächtnisses gegen ein elektronisches
- Erneuerung der Verdrahtung zur Einhaltung der elektrischen Sicherheit
- Montage des Gerätes
- vollständiger Systemtest mit Prüfprotokoll und elektrischer Sicherheit

Für die Überholung muss die RM20/CS inkl. aller Komponenten eingeschickt werden.